

Realizado por:
 Dra. T. Marrodán Ciordia, Dra. M. Arias Temprano

 Revisado y Aprobado por: Jefe de Servicio
 Dra. M.I. Fernández Natal

EXUDADO CONJUNTIVAL
MATERIAL NECESARIO
LOCALIZACIÓN

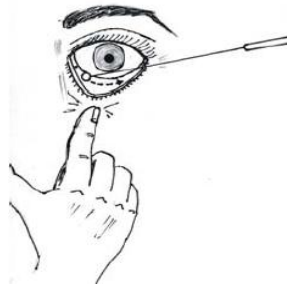
 Hisopo Dacron
 varilla flexible
 (tapón naranja)


Suero salino estéril


 Consulta de Microbiología
 (Sala de extracciones)

PROCEDIMIENTO

- Si existe presencia de exudado no hace falta humedecer el hisopo, de lo contrario humedecer la torunda en suero fisiológico y frotar sobre la conjuntiva tarsal inferior, desde el ángulo lateral al interno.
- En caso de obstrucción del canal lacrimal, presionar sobre éste y recoger el exudado
- Deberá utilizarse una torunda para cada ojo, especificando en cada uno derecho e izquierdo. Cada hisopo irá acompañado de su volante de petición.
- Transporte inmediato al laboratorio.


OBSERVACIONES

- En caso de sospecha de infección por *Chlamydia trachomatis* ponerse en contacto con el laboratorio de Microbiología.
- En caso de sospecha de infección por virus herpes simple utilizar medio de transporte específico para virus (Vircell) o en su defecto hisopo Dacron sin medio de transporte.


Anexo:

Anexo I: Resumen Ficha Técnica