



## ENVIO VACUNA GRIPE CHIROMAS®

### PRESENTACION

Envases clínicos de 10 dosis sin aguja + agujas de bioseguridad de **25 mm**  
(23Gx1 -0.6mmx25mm)



### TRANSPORTE REFRIGERADO +2°C +8°C

Empresa encargada del transporte: INTEGRA2.

Características: camión frigorífico con control de temperatura.

### DISTRIBUCIÓN

La caja que lleva el albarán lo lleva pegado por fuera, con un sobre transparente adhesivo con el texto "**CONTIENE ALBARAN**" (normalmente irá en una caja de agujas).

El laboratorio mandará el albarán también por email para un mejor seguimiento al Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública.




Ante cualquier incidencia en la entrega:

- Apuntar en el albarán en el momento de la recepción.
- Informar a Atención al Cliente **en un plazo máximo de 48 horas** (ver datos de contacto al final de este documento).

**PACKAGING**

Las vacunas irán acondicionadas en cajas de cartón con Poliéstireno Extruido revestido con Aluminio-kraft blanco, gel refrigerante en su base / superficie y separadores en cajas picking:

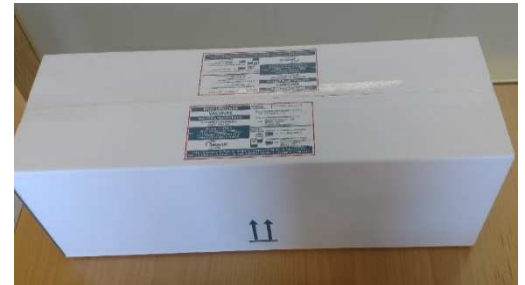

Características de las cajas

	<b>Presentación 10x1</b>	<b>Caja picking</b>
<b>Producto</b>	<b>Chiromas 10x1 <sup>(1)</sup></b>	<b>Picking</b>
Dimensiones externas (largo*ancho*alto)	364*279*513mm	270*270*320mm
Dimensiones caja expedición Seqirus 2019 <sup>(2)</sup>	346*261*435	250*250*250mm
Volumen	48,7L	15,9L

*(1) Código nacional 716133-2.  
(2) Incluyen 42 cajas de 10 vacunas (420 dosis), cada caja de 10 dosis mide 130\*44\*124mm. En total 10.080 dosis por palet acondicionado*

En la etiqueta exterior se incluirán las instrucciones de lectura de los monitores de temperatura y de congelación.

**MUY URGENTE VACUNAS**

**MATERIAL REFRIGERADO**

NO CONGELAR - MANTÉNGASE ENTRE +2°C Y +8°C

CONTIENE MONITOR DE TEMPERATURA Y CONGELACIÓN

PRESENTACIÓN PARA PROGRAMA DE VACUNACIÓN PROHIBIDA SU VENTA

**Seqirus**  
A CSL COMPANY

**A PARTIR DE LA FIRMA DEL TALÓN DEL TRANSPORTISTA SE DISPONE DE UN PERIODO DE 24 HORAS PARA CONFIRMAR LAS DESVIACIONES DEL MONITOR DE TEMPERATURA Y DEL MONITOR DE CONGELACIÓN**

**MONITOR DE TEMPERATURA**

Si **no** aparece coloreada la ventanilla número 1:  
→ Puede utilizar el producto

Si aparece coloreada la ventanilla número 1:  
→ Mantenga en Cuarentena entre 2-8°C  
Contacte con Seqirus en:  
Tlf: 93/781 78 84  
E-mail: atencioncliente.es@seqirus.com

---

**MONITOR DE CONGELACIÓN**

Si su monitor de congelación muestra el símbolo:  
✓ Sin alarma → Puede utilizar el producto

Si su monitor de congelación muestra el símbolo:  
X Alarma → Mantenga en Cuarentena entre 2-8°C  
Contacte con Seqirus en:  
Tlf: 93/781.78.84  
E-mail: atencioncliente.es@seqirus.com

## INDICADORES

### Tipos de indicadores utilizados

#### a) Indicador de congelación: FreezeAlert

En la pantalla del indicador pueden aparecer dos signos:



→ “sin alarma”.

→ “con alarma” mantenga el producto en cuarentena entre +2°C y +8°C y contacte con el Departamento de Atención al Cliente de Seqirus (ver datos de contacto).

#### b) Indicador de temperatura alta: 3M Monitor Mark (9860C):

Si aparece coloreada la ventanilla número 1, mantenga el producto en cuarentena entre +2 y +8°C y contacte con el Departamento de Atención al Cliente de Seqirus (ver datos de contacto).



### Cantidad y colocación

Los indicadores se colocarán próximos al producto. Dependiendo del volumen se colocarán indicadores por palé o por caja.

En pedidos con envíos en cajas, habrá 1 indicador de congelación por caja 5 cajas. La caja que lleve el indicador de congelación irá adecuadamente identificada. Si el pedido requiere un envío inferior a 5 cajas siempre llevará un indicador de congelación.

Habrá 1 indicador de temperatura en cada caja.

#### **IMPORTANTE:**

**Antes de cualquier comprobación, MANTENER EL PRODUCTO ENTRE +2°C y +8°C.**

**Estos indicadores se utilizan únicamente para el transporte con lo que cualquier lectura posterior a la entrega del transportista no es válida.**

#### **DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE SEQIRUS**

**Teléfono: 93/781.78.84 E-MAIL:**

**destinatario principal:**

[atencioncliente.es@seqirus.com](mailto:atencioncliente.es@seqirus.com)

**añadir siempre en copia a:**

[Odile.dervaux@seqirus.com](mailto:Odile.dervaux@seqirus.com)

[Fernando.romagnolo@seqirus.com](mailto:Fernando.romagnolo@seqirus.com)